

Catálogo de Produtos



ANCOR **TEC**

ANVISA: 10208610066 - Âncora de Sutura Ortopédica Ancortec

Que es?

La Áncora de sutura Ancortec es un implante ortopédico que promueve una fijación del tejido blando al hueso. Ese vínculo será hecho de acuerdo con la técnica realizada por el cirujano. Compuesta de una áncora de sutura en titanio con hilos de sutura no absorbibles montadas a un dispositivo de inserción. Es fornecida estéril, en blíster primario y secundario y apenas para una única utilización.

Composición del dispositivo médico

● Áncora en Titanio Ti6Al4V de acuerdo con la Norma ASTM F136

Dibujo de la rosca auto perforante permite:

- Rápida y fácil inserción;
- Sin necesidad de pre-rosca;
- Alta resistencia al torque;

● Hilo de sutura UHMWPE


- Más fuerte – 47% más resistente que el hilo más próximo en el teste del nudo y optimas propiedades de resistencia a la tracción;
- Más suave – 17% más lubricado para menos abrasión y mejor deslizamiento de los nudos;
- Dos colores – en las áncoras con dos hilos están disponibles dos colores distintos para mejor identificación.

Diámetros de hilos 2-0 para diámetros  1,7 y  2,0

Diámetros de hilos 2 para diámetros  2,7,  3,5 y  5,0

● Dispositivo de Inserción

- Dispositivo anatómico permite fácil manejo e introducción;
- Tiene alojamiento práctico y seguro de las agujas;
- Dimensionado para aplicación del torque de inserción de las áncoras;
- Tapa identificada por colores que diferencian visualmente los diámetros de las áncoras;
- No necesita de instrumental adicional de inserción.

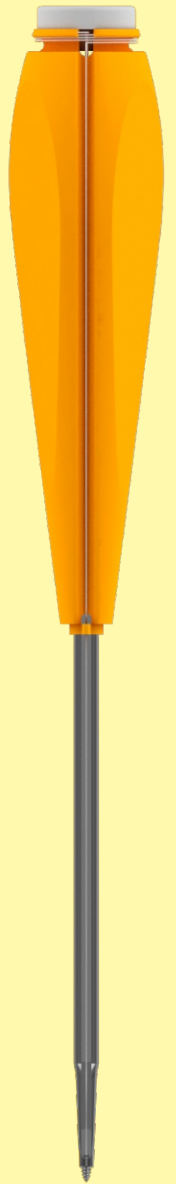

Beneficios

La Áncora de Sutura Ortopédica Ancortec es indicada para casos de alteraciones degenerativas, traumáticas o mecánicas, procesos inflamatorios y lesiones relacionadas a la práctica deportiva que soliciten la reinsertión quirúrgica de tejidos blandos y ligamientos a la estructura de hueso, promoviendo la mantención de la unión del tejido blando al hueso. La utilización de la Áncora de Sutura Ortopédica Ancortec también es indicada en el tratamiento quirúrgico de tendinitis, rupturas de fibras y en casos de subluxación. La Áncora de Sutura Ortopédica Ancortec puede ser utilizada en diversas articulaciones, adaptándose

Indicación de uso del dispositivo médico

- **Articulación Temporomandibular**
 - Reparación de luxación de la ATM.

- **Hombro**
 - Reparación de lesiones de Bankart;
 - Reparación de lesiones SLAP;
 - Reparación de luxaciones acromioclaviculares;
 - Reparaciones de rupturas del manguito rotador;
 - Ruptura de la Cápsula o Reconstrucciones del labrum;
 - Tenodesis de bíceps;
 - Reparaciones del músculo deltoide;

- **Pié y Tobillo**
 - Reparaciones del hallux valgus;
 - Reparaciones / Reconstrucciones de inestabilidad lateral o medial
 - Reparaciones / Reconstrucciones de tendones
 - Reconstrucciones de la zona central del pié
 - Reparaciones / Reconstrucciones del tendón/ligamento metatarsiano

- **Codo, Muñeca y Mano**
 - Reconstrucción del ligamento escafolunar
 - Reconstrucciones de ligamento colateral radial- cubital
 - Reparación de epicondilitis lateral
 - Fijación del tendón del biceps

- **Rodilla**
 - Reparaciones extracapsulares

1.7

103.00617

Ancortec con aguja Ø1,7mm UHMWPE



2.0

103.00620

Ancortec con aguja Ø2,0mm UHMWPE



2.7

103.00627


Ancortec con aguja Ø2,7mm UHMWPE



2.7

103.00827

Ancortec con 02 hilos y aguja Ø2,7mm UHMWPE

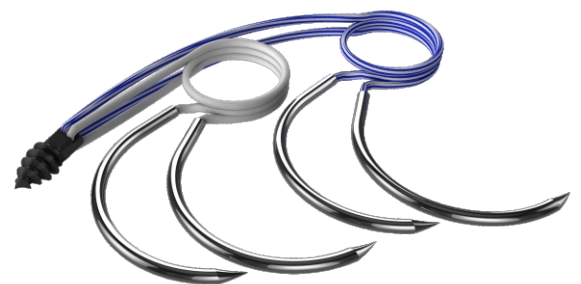

ÂNCORA DE SUTURA

3.5

103.00635

Ancortec con aguja Ø3,5mm UHWMPE



3.5

103.00835

Ancortec con 02 hilos y aguja Ø3,5mm UHWHPE



5.0

103.00650

Ancortec con aguja Ø5,0mm UHWMPE



5.0

103.00850

Ancortec con 02 hilos y aguja Ø5,0mm UHWMPE



ÂNCORA DE SUTURA

1.7

103.00217

Ancortec Ø1,7mm UHMWPE



2.0

103.00220

Ancortec Ø2,0mm UHMWPE



2.7

103.00227

Ancortec Ø2,7mm UHMWPE



3.5

103.00235

Ancortec Ø3,5mm UHMWPE




5.0

103.00250

Ancortec Ø 5,0mm UHMWPE



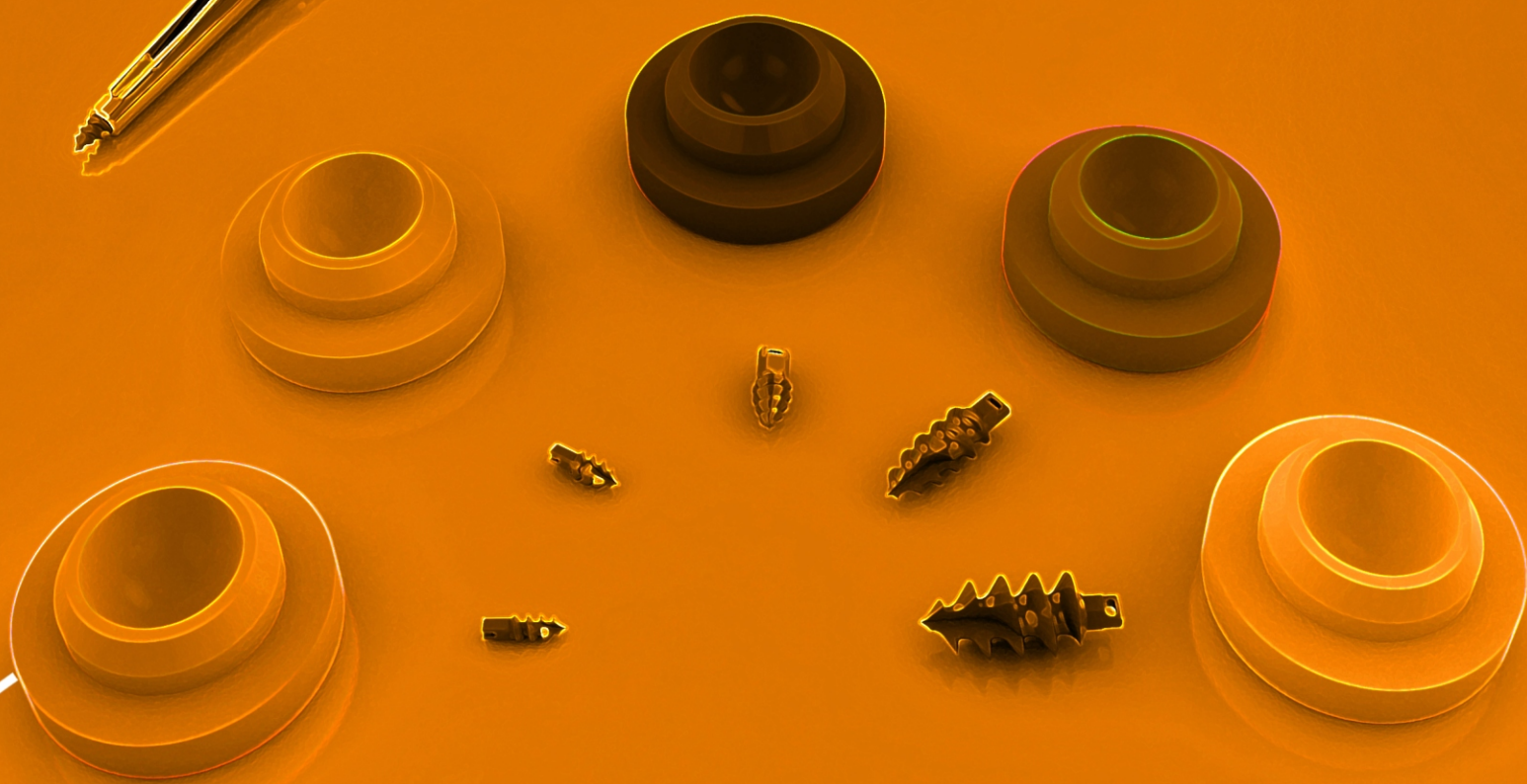

Catálogo de Produtos